


Manejo y Cuidado de Botón Mini One



Los botones MINI ONE están diseñados para ayudar a alimentar a pacientes que no pueden alimentarse por vía oral.

El botón debe medirse con precisión, colocándose directamente en el estómago a través del estoma, para realizar alimentación, administración de medicamentos y descompresión gástrica si es necesario.

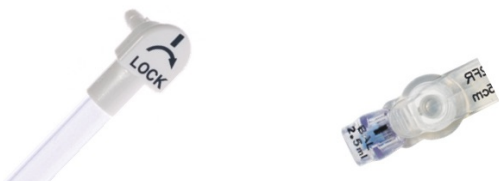

Cuidado e Higiene

Siempre se debe lavar las manos cuidadosamente antes y después de cualquier contacto con el botón MINI ONE y los sistemas de alimentación.

Diariamente: Cuidado del Estoma

- ❖ Limpiar y secar la piel alrededor del sitio del estoma dos veces al día.
- ❖ Una vez cada día, se debe girar el dispositivo en un círculo completo, deteniéndose en un punto diferente cada día.
- ❖ Después del baño dejar seco el sitio del estoma.
- ❖ No utilizar productos en base alcohol para limpiar la parte exterior del botón, ni el del sitio del estoma.
- ❖ También, se debe limpiar entre medicaciones, para reducir el riesgo de que los medicamentos reaccionen entre sí y potencialmente causen un bloqueo del dispositivo.



- ❖ Si el uso del botón es continuo, el botón MINI ONE debe ser lavado tres veces al día.

Semanalmente:

- ❖ Una vez cada semana se debe comprobar el agua del balón. Esto se hace insertando una jeringa de 5 ml o 10 ml en el orificio de inflado del balón, retirando lentamente el agua. El agua observada debe ser clara, y el volumen retirado debe ser aproximadamente como se utilizó por primera vez para inflar el balón.
- ❖ Dejando el dispositivo en su lugar, se debe volver a inflar el balón usando agua estéril.

Funcionamiento del Botón: Alimentación y administración de medicamentos

Para tener acceso al botón y realizar la administración de alimentación o medicamentos, se deben realizar los siguientes tres pasos, con el objeto de lograr conectar el tubo de alimentación al botón MINI ONE sin dañarlo. Para desconectar, se deben realizar los mismos pasos en forma inversa.

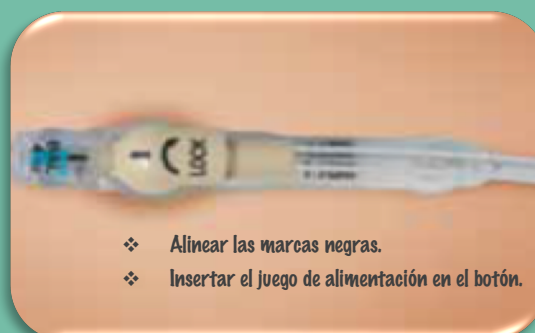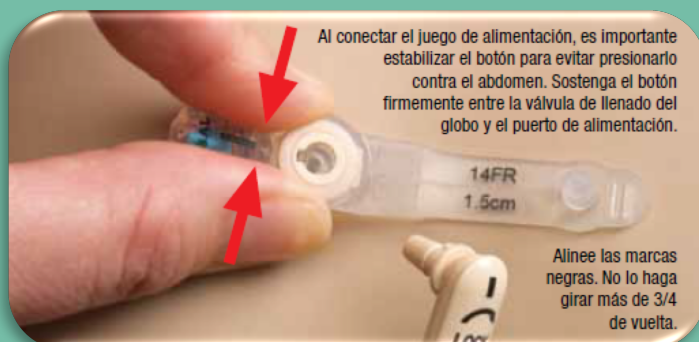

- ❖ Girar hasta $\frac{3}{4}$ de vuelta en sentido horario.
- ❖ El procedimiento a seguir es el mismo para juegos de alimentación continua y en bolos.



Administración de alimentos a través del botón MINI ONE

- Luego de conectar, con una jeringa de punta de pivote cargada con agua, se debe tirar el émbolo de la jeringa hasta que refluya contenido estomacal, con el objeto de comprobar que se encuentre en su sitio, para posteriormente lavar con la jeringa llena con agua hasta dejar limpio.
- Conectar la jeringa o alimentación continua. Siempre se debe cebar la tubería, previo a la administración de las soluciones para prevenir la acumulación de aire en el estómago
- Al terminar la alimentación, se debe limpiar con agua el tubo y el botón con 5ml de agua en el caso de niños y 10 a 20 ml en adultos, y cerrar posteriormente la abrazadera.
- Desconectar el tubo de alimentación.



Al final de cada alimentación o administración de medicamentos se debe limpiar siempre con agua el tubo de alimentación y el botón MINI ONE. Luego de desconectar el tubo de alimentación, se debe lavar con agua tibia (NO HIRVIENDO) y solución jabonosa para eliminar los residuos de alimentación (Prevención de oclusión).

Administración de medicamentos a través del botón MINI ONE

Tabla de volumen de llenado del Botón con Globo Mini ONE*

Calibre francés	Mínimo	Recomendado	Máximo
12F	2 ml	2.5 ml	3 ml
14F	3 ml	4 ml	5 ml
16F	4 ml	6 ml	8 ml
18F	6 ml	8 ml	10 ml
20F	7 ml	10 ml	15 ml
24F	7 ml	10 ml	15 ml

La administración de medicamentos debe ser en forma líquida, en caso de ser en comprimidos, se debe consultar al médico o enfermera a cargo, si estos son posibles de triturar y diluir en agua previamente. Para el lavado, se deben seguir los mismos pasos anteriormente mencionados.

Colocación del Set de Administración



Colocación del Set de Administración

1. Levantar la tapa de botón MINI ONE.
2. Alinear la línea negra del conector del conjunto de alimentación con la línea negra en la parte superior del botón MINI ONE.



3. Mantener presionado el botón MINI ONE a cada lado del puerto de alimentación central.
4. Empujar el conjunto de alimentación en el conector del conjunto de alimentación MINI ONE y girarlo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
5. El juego de alimentación está bloqueado en su lugar .

Bloqueo u Oclusión

- ❖ Si el balón del Botón MINI ONE se bloquea, se puede intentar desbloquearlo limpiando con 10 ml de agua tibia, empujando el émbolo de la jeringa hacia atrás y hacia delante.
- ❖ Dejar el dispositivo por 15 minutos con agua y limpiar otra vez. Si esto no logra desbloquear el dispositivo, debe ponerse en contacto con el profesional de salud a cargo

Salida del balón del botón MINI ONE

Es importante que el botón MINI ONE sea reemplazado tan pronto como sea posible para prevenir el cierre del estoma.

IMPORTANTE: No retirar el Botón MINI ONE. Si se ha caído y no se tiene una alternativa o no se puede poner en contacto con el profesional de salud que generalmente está a cargo, contactar con el hospital más cercano tan pronto como sea posible

Fugas alrededor del estoma

En caso de fugas, verificar previamente el volumen de llenado (Mínimo recomendado o máximo). Si esto persiste se debe consultar con el personal de salud.

Las fugas alrededor del estoma se pueden deber a los cambios anatómicos que sufre el paciente, no necesariamente se relacionan con la integridad (Cambios de musculatura abdominal, aumento o disminución de grasa abdominal, crecimiento por parte del paciente. Nunca se debe extraer un botón en caso de fugas, eritema, o mal olor. Siempre se debe dirigir hacia el personal médico, a fin de preservar el estoma

Problemas del estoma

Ponerse en contacto con el profesional de la salud que generalmente está a cargo, si el estoma:

- ❖ Emite olor.
- ❖ Presenta sangrado persistente.
- ❖ La piel circundante está constantemente roja, o esta hinchada.

La duración de un botón es variable según la manipulación adecuada y cambios en la anatomía del paciente en cuanto a textura, variante anatómica y desarrollo físico.

La vida útil estimada del tubo de administración es de 2 semanas, dependiendo de la limpieza adecuada y variabilidad en el número de usos.

