

GROSHONG 7 FR CON INTRODUTOR

CÓDIGO: 7711700

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU

Indicaciones

El catéter venoso central tunelizado GROSHONG fabricado de silicona médica, con punta redondeada cerrada que cuenta con una válvula patentada de tres posiciones sensibles a la presión, llamada válvula GROSHONG. Esta válvula está situada cerca de la punta del catéter y permite la infusión de fluidos y la aspiración de sangre. Cuando no está en uso, la válvula restringe el flujo de sangre y el embolismo aéreo. La presión positiva en el catéter (Gravedad, bomba, jeringa) abrirá la válvula hacia fuera, permitiendo la infusión de fluido.


El catéter GROSHONG está diseñado para un acceso vascular central a largo plazo, permitiendo la administración de fluidos IV, productos sanguíneos, fármacos, soluciones de nutrición parenteral, hemoderivados, así como la extracción de sangre.

Características

- Tamaño del introductor: 14 G.
- Material del catéter: Silicona radiopaca de color azul, con válvula, por lo que no posee clamp.
- Punta redondeada y líneas radiopacas con marcas de profundidad.
- Cuff para fijación en los tejidos, a una distancia de 24 cm de la punta del catéter.
- Dimensiones del catéter:
 - 1.3 mm diámetro interno.
 - 2.2 mm diámetro externo.
 - 50 cm longitud total.
- Presión máxima promedio: Menor a 40 psi.
- Mantenimiento y volumen del cebado (ml): El catéter debe ser purgado energicamente con una jeringa de 10 ml de solución salina normal después de cada uso, asegurando la permeabilidad del catéter.
- Volumen de Cebado: 0.7 ml.
- Todos los componentes son biocompatibles y libres de látex, de uso único.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único, apirógeno.

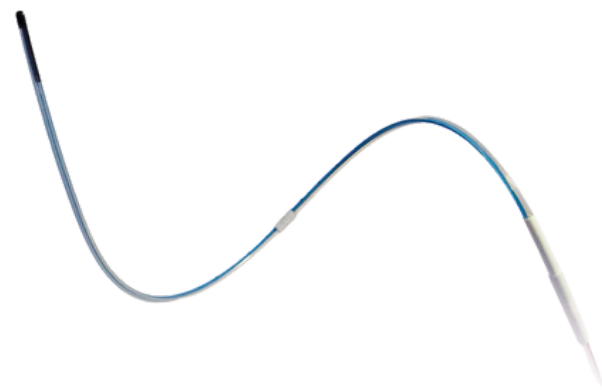

Componentes

- Introductor Peel- Apart.
- Aguja introductora de 18 G.
- Aguja 22 G.
- Aguja de 18 G.
- Aguja de 25 G.
- Alambre guía de 45 cm.
- Tunelizador.
- 1 Tapa Final para los extremos.
- Jeringa.
- Bisturí.
- Conector.
- Ala de sutura acoplable.
- Esponja.
- Gasa (10 cm x 10 cm).
- Cobertura fenestrada.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Almacenamiento

El producto debe ser mantenido en un lugar limpio, seco

Certificaciones

ISO 13485:2016 - FDA .