

SET SUCCIÓN IRRIGACIÓN

CÓDIGO: CAN2505P**MARCA PETERS SURGICAL****PROCEDENCIA: FRANCIA**

Set de aspiración e irrigación desechable por gravedad para cirugía general y laparoscópica.

Características

- Fácil de usar, tipo trompeta.
- Deslizamiento óptimo al interior del trocar, disminución de riegos de accidente por acoplamiento capacitivo y ningún reflejo luminoso sobre la cánula, gracias a su revestimiento de teflón.
- Permite realizar una extracción para análisis de muestra gracias a su conexión luer-lock para conectar jeringas.
- Sistema antireflujo que ofrece una irrigación más precisa, con reflujo muy reducido.
- Permite conectarse a diferentes frascos de aspiración por su adaptador flexible y universal.
- Pistones vaciados con el objetivo de evitar volumen muerto y para reducir los reflujos.

Componentes

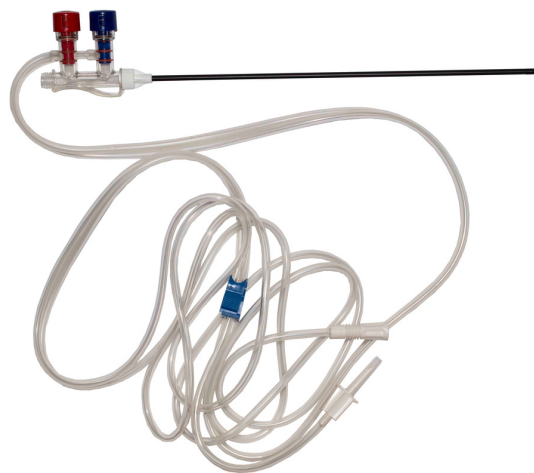
- Una cánula con filtro no traumático de 5mm de diámetro y 330mm de longitud.
- Un asa de mango ergonómico tipo trompeta con dos pistones, que permite sacar muestras.
- Un tubo doble flexible y transparente de 2.5mm de longitud.
- Un sistema de punción para bolsa de suero y un cierre clamp.
- Un adaptador flexible y universal para la conexión de los frascos de aspiración.

Dimensiones

- Longitud: 330 mm
- Diámetro: 5 mm

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

**Empaque**

El producto viene embalado en una caja con 10 unidades estériles.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno con envase indemne.

Certificaciones

- ISO 13485.
- EC.