

STATLOCK ARTERIAL SELECT

CÓDIGO: ART0420

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

El dispositivo de estabilización StatLock Arterial Select está diseñado para mantener las líneas arteriales en su lugar durante la terapia, acomodándose a una amplia variedad de catéteres arteriales.

Indicaciones de Uso

Estabilización y fijación de un catéter arterial.

Contraindicaciones


- Alergias conocidas a cinta adhesiva.
- Sensibilidad conocida a la benjuina.

Características

- Presenta un retenedor, que asegura el catéter en su lugar y se acomoda a una amplia variedad de catéteres de línea central.
- Presenta una base anclaje, de fácil y rápida aplicación, con una almohadilla de anclaje de poliéster tricot respirable, no absorbente, que proporciona una mayor seguridad al catéter y comodidad al paciente. Además, incluye una tintura de benzoína para mejorar la fijación.
- Presenta un adhesivo hipoalergénico, removible sólo con alcohol.
- Elimina sujeción con sutura y reduciendo las complicaciones del catéter.
- Aumenta los tiempos de permanencia del catéter.
- Tiene un dispositivo de retención ideal para organizar y separar las extensiones del catéter y reducir la tensión en las extensiones del catéter

Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).

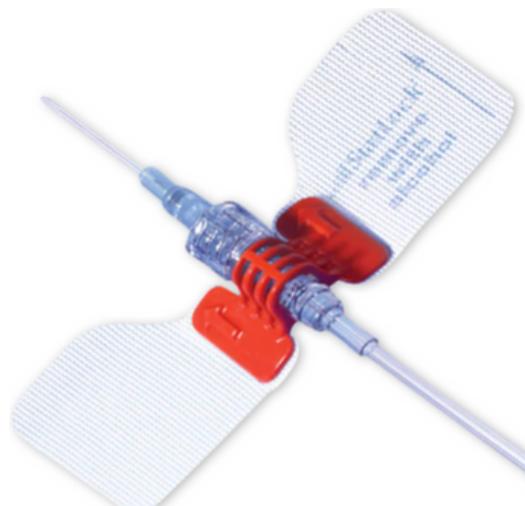

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 25 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, de un solo uso, libre de látex y DEHP (Ftalatos).

Certificaciones

- ISO 13485
- FDA