

AGUJA HUBER 22G X 25 MM

CÓDIGO: HN2225

MARCA: MEDTEC

FABRICANTE: KDL (SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP)


PROCEDENCIA: CHINA

Las agujas huber están diseñadas para administración de medicamentos en infusiones cortas o permeabilización para uso en los sistemas de acceso implantables, permitiendo además, la toma de muestra de sangre venosa, sin dañar el septum del reservorio.

Características

- Agujas de cono plástico
- Material: Acero inoxidable de calidad médica.
- Extension tubería: PVC
- Permiten acoplar un tubo de extensión con múltiples línea.
- Clamp incorporado para la correcta limpieza de los dispositivos de reservorio
- Medidas: 22 G x 25 cm

.Proporciona un circuito cerrado.

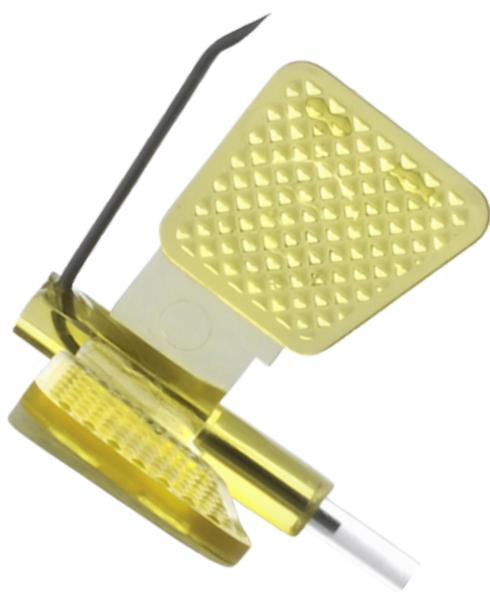

Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, estériles en óxido de etileno, libres de látex, ftalato y DEHP.

Empaque

El producto viene embalado en una caja de 50 unidades, cada uno en blister unitario estéril en óxido de etileno, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

Certificaciones

- EEC
- ISO 13485

Almacenamiento

En un ambiente limpio, fresco y seco.