

# BOMBA CADD LEGACY PLUS

## CÓDIGO: 21-6500-24

MARCA: ICU MEDICAL

PROCEDENCIA: EEUU


Bomba de infusión ambulatoria para terapias de infusión intermitente o continua.

### Vías de Administración

- Intravenosa.
- Intra-arterial.
- Subcutánea.
- Epidural.
- Intra-tecal

### Características

- Pantalla fácil de leer y entender: proporciona la información para los ajustes de programación y resolución de problemas.
- Memoria de eventos: Los últimos 500 eventos en el histórico de la bomba pueden transmitirse, de forma directa a un PC.
- Tamaño de la bomba: 1.6 x 3.8 x 4.4 pulgadas.
- Peso: 392 gramos.
- Fuente de Alimentación: 2 pilas alcalinas AA. Precisión: +/- 6% nominal.
- Características de programación: Unidades de Programación: Mililitros.
- Volumen del Recipiente: 1 ml- 9999 ml o desactivado.
- Tasa Continua: 0.1 a 125 ml/hr.
- Tasa Intermitente: 0 a 125 ml/hr.
- Volumen de Dosis: 0.1-1000 ml.
- Duración de Dosis: 1 min - 24 horas.
- Funciones de Seguridad:
  - Detector de aire en la línea.
  - Sensor de detección de cassette.
  - Sensor de oclusión: línea arriba y línea abajo, para alertar en caso de interrupción en la administración.
  - 3 niveles de bloqueo de la pantalla.

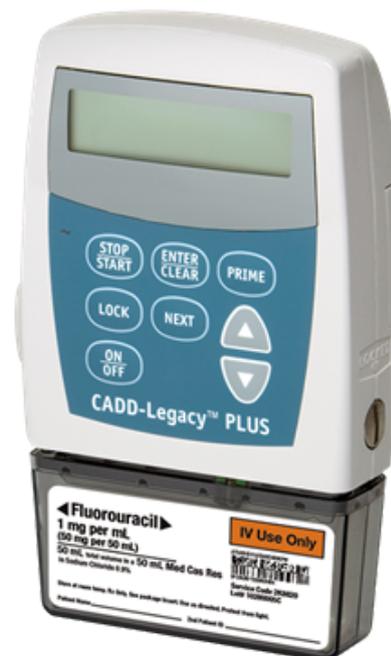

### Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema CADD son biocompatibles y libre de látex.

### Almacenamiento

El equipo debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco. Usar cualquiera de las soluciones siguientes:

- Solución jabonosa.
- Alcohol (93%).
- Alcohol isopropílico (99%),
- Clorhexidina (70%).

No sumergir la bomba en agua o solución de limpieza.

### Certificaciones

- ISO 13485.
- FDA.