

BOTÓN DE GASTROSTOMÍA DEGANIA

MARCA: DEGANIA. QMF

PROCEDENCIA: ISRAEL

Botón de gastrostomía con balón de bajo perfil, estéril, con sistema ENFIT, proporciona un medio de acceso directo al estómago para la administración de fluidos nutricionales y/o medicación a través de estomas bien establecidos.

Características

- Material: Silicona radiopaca transparente de alto grado médico, estéril que reduce la irritación de la piel y mejora la comodidad del paciente.
- Almohadilla externa que mantiene la posición
- Perfil bajo.
- Se coloca a nivel de la piel.
- Proporciona una mayor comodidad y movilidad y un menor riesgo de desplazamiento de la sonda.
- El botón DEGANIA presenta:
 - Diseño del globo en forma de manzana, lo que ayuda a reducir las fugas al proporcionar una mayor superficie de contacto con el revestimiento del estómago.
 - Válvula antirreflujo proximal que impide el reflujo del líquido gástrico.
 - Franjas radiopacas que permite la visualización durante la colocación inicial.
 - Tapa de sellado para cerrar el puerto de acceso.
 - Punta empotrada atraumática que evita la irritación de la pared del estómago y permite que el botón se retraiga en el eje de la sonda, reduciendo las molestias durante la extracción.
 - Punta distal cónica que permite una inserción fácil y atraumática sin rigidizador.
- Presenta una reducción de errores en la conexión:
 - El diseño especial de los conectores garantiza que los dispositivos de administración enteral sólo puedan conectarse a dispositivos de acceso enteral.
 - Reduce la desconexión accidental.
 - Las roscas de bloqueo ayudan a evitar que el conector se separe accidentalmente del tubo.



Certificaciones

- ISO 13485 - FDA

Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema de botones DEGANIA son biocompatibles y libre de látex.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado en caja individual estéril, en caja madre de 5 unidades etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote


BOTÓN DE GASTROSTOMÍA DEGANIA

MARCA: DEGANIA. QMF
 PROCEDENCIA: ISRAEL

Mayor durabilidad del balón

Las pruebas realizadas se basan en la norma ISO 20695-2020, mostrando una durabilidad considerablemente mayor del balón en condiciones controladas de laboratorio con líquido gástrico simulado (pH 1,2 +/- 0,1).

Sobrevivir en solución gástrica simulada durante 83 días equivale a una vida útil real de 332 días, y 87 días equivale a una vida útil real de 348 días.

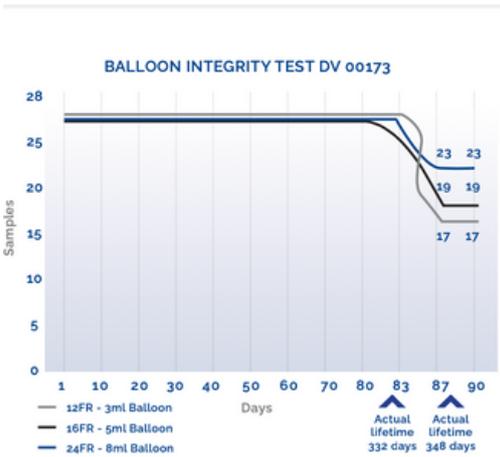

Kit incluye:

- Botón de gastrostomía de bajo perfil
- Pack de gel lubricante
- Gasas cuadradas
- Tubo de alimentación ENFit® doble (en Y) con conector de bloqueo seguro en ángulo recto
- Tubo de alimentación ENFit® de un puerto con conector de bloqueo recto y seguro
- Jeringa ENFit® de 35cc
- Jeringa deslizable Luer slip de 10cc



Presentaciones

Size	Balloon Size	Length	Size	Balloon Size	Length
12FR	3ml	0.8cm	12FR	3ml	2.3cm
14FR	4ml		14FR	4ml	
16FR	5ml		16FR	5ml	
18FR	5ml		18FR	5ml	
20FR	8ml		20FR	8ml	
24FR	8ml		24FR	8ml	
12FR	3ml	1.0cm	14FR	4ml	2.5cm
14FR	4ml		16FR	5ml	
16FR	5ml		18FR	5ml	
18FR	5ml		20FR	8ml	
20FR	8ml		24FR	8ml	
24FR	8ml				
12FR	3ml	1.2cm	14FR	4ml	2.7cm
14FR	4ml		16FR	5ml	
16FR	5ml		18FR	5ml	
18FR	5ml		20FR	8ml	
20FR	8ml		24FR	8ml	
24FR	8ml				
12FR	3ml	1.5cm	12FR	3ml	3.0cm
14FR	4ml		14FR	4ml	
16FR	5ml		16FR	5ml	
18FR	5ml		18FR	5ml	
20FR	8ml		20FR	8ml	
24FR	8ml		24FR	8ml	
12FR	3ml	1.7cm	12FR	3ml	3.5cm
14FR	4ml		14FR	4ml	
16FR	5ml		16FR	5ml	
18FR	5ml		18FR	5ml	
20FR	8ml		20FR	8ml	
24FR	8ml		24FR	8ml	
12FR	3ml	2.0cm	12FR	3ml	4.0cm
14FR	4ml		14FR	4ml	
16FR	5ml		16FR	5ml	
18FR	5ml		18FR	5ml	
20FR	8ml		20FR	8ml	
24FR	8ml		24FR	8ml	
12FR	3ml	2.0cm	12FR	3ml	4.5cm
14FR	4ml		14FR	4ml	
16FR	5ml		16FR	5ml	
18FR	5ml		18FR	5ml	
20FR	8ml		20FR	8ml	
24FR	8ml		24FR	8ml	