

# CLEO 90

**CÓDIGO: 21-7220-24 /21-7230-24**

**MARCA: ICU MEDICAL**

**PROCEDENCIA: EEUU**


Dispositivo desechable de infusión subcutánea continua de fármacos, mediante una bomba externa, permitiendo una infusión simple, rápida, cómoda, segura y eficiente.

## Indicaciones

Dispositivo de infusión subcutánea desechable diseñado para la infusión de una variedad de medicamentos, incluyendo la insulina

## Características

- Brinda seguridad, al presentar la aguja incluida dentro del dispositivo, reduciendo las lesiones accidentales.
- Consta de un aplicador que contiene una zona adhesiva con cánula, aguja y una línea de infusión separada para conexión al área deseada.
- Después de la inserción de la aguja y de la cánula, el aplicador retrae automáticamente la aguja para protegerla.
- Inserción rápida y con una sola mano.
- El equipo de infusión puede ser usado con conectores Luer estándar, lo que significa que puede utilizarse con cualquier bomba que tenga un conector Luer.
- Longitud de cánula:
  - 6 mm: Set subcutáneo de 6 mm (cod 21-7220-24)
  - 9 mm: Set subcutáneo CLEO de 9 mm (cod 21-7230-24)
- Longitud del tubo 60 cm.

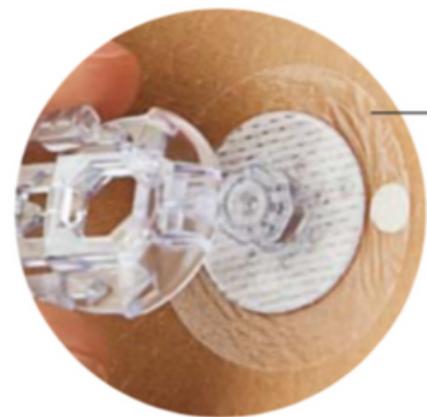

## Almacenamiento

El producto debe ser mantenido en un lugar limpio, seco.

## Certificaciones

- FDA
- ISO 13485.

## Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, apirógeno.

## Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema Homepump son biocompatibles y libres de DEHP.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.