

# CATÉTER POWER PICC 6 FR. TRIPLE LUMEN

## CÓDIGO: 8386118

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Catéter venoso central insertado periféricamente (PICC), para uso a corto o largo plazo. Indicado para administración parenteral de medicamentos, fluidos y soluciones nutritivas, toma de muestra de sangre venosa y administración de tratamientos intravenosos.

Permite el uso de medios de contraste (Tecnología POWER) a través de bombas de inyección (5ml/sg), y monitorización de la presión venosa central.

### Características

- Catéter con estilete interno triple lumen.
- Material del catéter: Poliuretano radiopaco de última generación.
- Dimensiones del catéter:
  - 6 FR (17 G/19 G/19 G diámetro interno).
  - 2.05 mm diámetro externo.
  - 55 cm longitud total.
- Volumen de Cebado: 0.76 ml / 0.47 ml/ 0.47 ml.
- Velocidad de flujo de la inyección de poder: 5 ml/seg.
- Velocidad de flujo por gravedad (ml/hr): 1163 ml/hr/ 275 ml/hr / 275 ml/hr.
- Presión máxima promedio: 300 psi. Exclusivamente la rama central (color morado) resiste alta presión.
- Tamaño del microintrodutor: 6 Fr x 7 cm.
- Mantenimiento: El catéter debe ser purgado enérgicamente con una jeringa de 10 ml de solución salina normal cada 12 horas o después de cada uso con técnica de push-stop con presión positiva.

### Biocompatibilidad


Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP.

### Certificaciones

- ISO 13485:2016
- FDA.

### Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

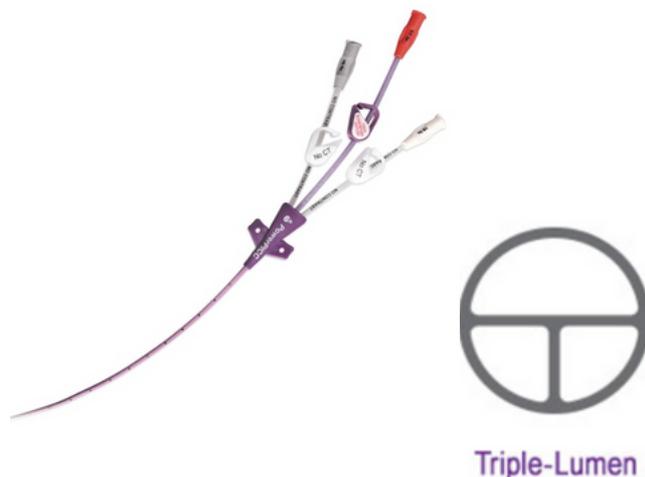

### Componentes

- Catéter PICC 6 FR triple lumen
- Sistema de fijación sin puntos Statlock PICC Plus.
- Microintrodutor MicroEZ de 6 Fr. x 7cm con dilatador venoso.
- Jeringa de 12 ml.
- Guía de nitinol con punta recta atraumática de 0.46 mm x 50 cm.
- Bisturí con seguridad.
- Aguja introductora de 21 G
- Introdutor Safety de 20 G
- 3 tapas para cada lumen
- Cinta de métrica.

### Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

### Empaque

El producto viene embalado en caja de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.