

# SET DE ADMINISTRACIÓN CADD TOTM

CÓDIGO: 21-7323-24

MARCA: ICU MEDICAL  
PROCEDENCIA: EEUU

Set de administración (bajada) epidural de flujo estándar destinado a la administración de fármacos a través de la bomba de infusión CADD SOLIS o CADD LEGACY.

## Características

- Set de administración con bandas amarillas para su identificación con punzón para bolsa.
- Presenta una función de seguridad integrada (Cubierta azul) que evita el flujo libre de fluidos.
- Volumen de Purgado: 2.3 ml.
- Longitud 198 cm (78 pulgadas).

## Almacenamiento


El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Componentes:

- Punzón para penetrar la bolsa.
- Mecanismo de detención de flujo, diseñado para evitar la infusión de gravedad no regulada (Flujo libre).
- Abrazadera o clamp.
- Válvula de retención unidireccional con conector Luer macho.

## Empaque

Empaque unitario, libre de látex con TOTM sin DEHP, en caja de 12 unidades.

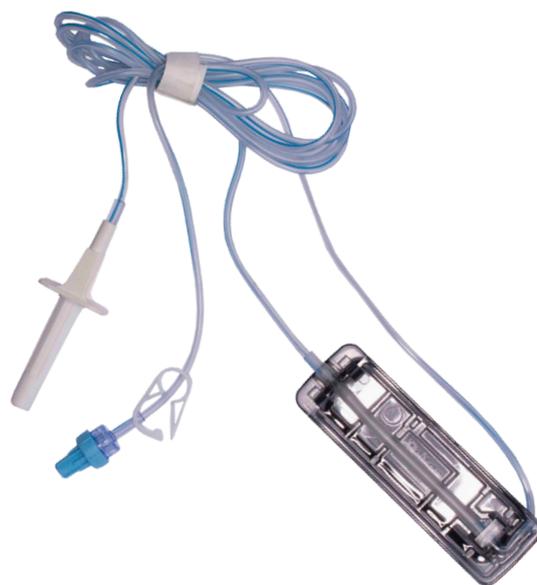

## Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema CADD son biocompatibles y libre de látex.

## Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno.

## Certificaciones

- ISO 13485.
- FDA.